



BLACK  
FOREST  
MEDICAL  
GROUP

# DORO®

**Pinces bipolaires ANTI-ADHÉSIVES**



# Droites



## Pointes droites, Pointe de 5 mm, Coagulation précise

Longueur	Longueur utile	Taille de la pointe	Taille de la pointe	Taille de la pointe
		0,4 mm	0,7 mm	1,2 mm
12,5 cm (4.9")	4,3 cm (1.7")	<b>5062.012</b>	5062.013	5062.015

# Pince-baïonnette



## Pointes droites, Pointe de 5 mm, Coagulation précise

Longueur	Longueur utile	Taille de la pointe	Taille de la pointe	Taille de la pointe	Taille de la pointe	Taille de la pointe
		0,4 mm	0,7 mm	1,0 mm	1,2 mm	1,5 mm
17,0 cm (6.7")	6,5 cm (2.6")	<b>5022.012</b>	<b>5022.013</b>	5022.014	5022.015	5022.016
20,0 cm (7.9")	9,5 cm (3.7")	<b>5024.012</b>	<b>5024.013</b>	<b>5024.014</b>	<b>5024.015</b>	<b>5024.016</b>
22,0 cm (8.7")	11,5 cm (4.5")	<b>5025.012</b>	<b>5025.013</b>	<b>5025.014</b>	<b>5025.015</b>	<b>5025.016</b>



## Pointes coudées, Pointe de 5 mm, Coagulation précise



Longueur	Longueur utile	Taille de la pointe	Taille de la pointe
		1,2 mm	1,2 mm
		45° haut	45° bas
19,0 cm (7.5")	8,5 cm (3.3")	5023.055	5023.065

### ANTI-ADHÉSIVES

Avec des pointes entièrement faites en argent massif noble, les propriétés anti-adhérentes de la pince DORO® restent en bon état pendant toute la durée de vie. Grâce à une conductivité thermique élevée, les pointes ne surchauffent pas, éliminant ainsi la carbonisation et l'adhérence des tissus. Il n'est donc pas nécessaire de nettoyer constamment les pointes.

### Précises

La conception des pointes des tous les types de pinces que se soit Droite, Baïonnette ou Baïonnette Irrigation permet une coagulation de précision en microchirurgie ou la coagulation d'une zone plus vaste lorsque les pointes de la pince sont appuyées pour former une surface plane. Toutes les pinces à trous baïonnette sont dotées de pointes parallèles conçues pour minimiser l'écartement des dents lors d'approches mini-invasives.

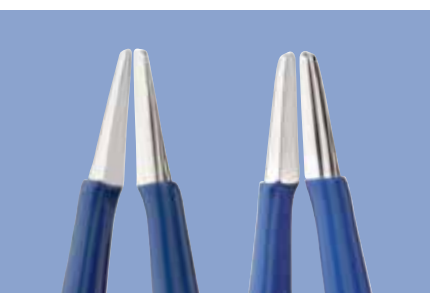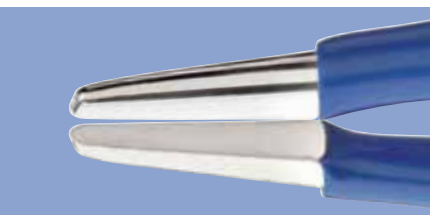

# Pince-baïonnette avec irrigation



## Pointes droites, Pointe de 5 mm, Coagulation précise

Longueur	Longueur utile	Taille de la pointe 0,4 mm	Taille de la pointe 0,7 mm	Taille de la pointe 1,0 mm	Taille de la pointe 1,2 mm
22,0 cm (8.7")	11,5 cm (4.5")	<b>5025.022</b>	5025.023	5025.024	5025.025

# Pince-baïonnette laparoscopique



## Pointes droites, Pointe de 5 mm, Coagulation planifiée

Longueur	Longueur utile	Taille de la pointe 0,4 mm	Taille de la pointe 0,7 mm	Taille de la pointe 1,2 mm
20,0 cm (7.9")	9,5 cm (3.7")	5034.012	5034.013	5034.015
23,0 cm (9.1")	12,5 cm (4.9")	5036.012	5036.013	<b>5036.015</b>
25,0 cm (9.8")	14,5 cm (5.7")	5038.012	5038.013	5038.015

## Pointes coudées, Pointe de 5 mm, Coagulation planifiée

Longueur	Longueur utile	Taille de la pointe 0,7 mm 15° haut	Taille de la pointe 0,7 mm 45° haut
23,0 cm (9.1")	12,5 cm (4.9")	5036.033	5036.053




### Visibilité maximale

Le design élégant des pinces DORO® offre un champ de vision maximale. Les pinces à irrigation vous aident à éliminer le sang résiduel du site chirurgical et à évacuer les hématomes. Elles sont particulièrement adaptées aux interventions de longue durée en dissipant efficacement la chaleur émergente.

### Sûres

Le guide attaché à nos pinces plus longues permet de maintenir les pointes alignées pour éviter l'effet d'un possible chevauchement et cisaillement. Ceci permet d'améliorer la sécurité et la précision.

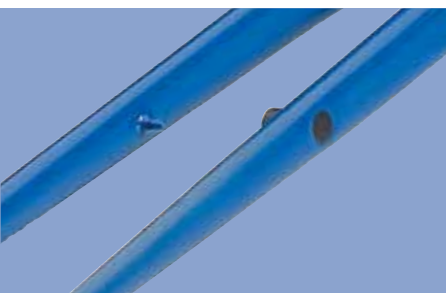

# Plateau de stérilisation



Autoclavable

Pour 6 pinces

Plateau de stérilisation DORO®  
pour 6 pinces bipolaires ANTI-ADHÉSIVES DORO®

5011.102

# Câbles bipolaires



Réutilisable

Fiche, côté générateur	Longueur	3,0 m (9.8')	5,0 m (16.4')
Raccord Erbe Câble à broche double		5015-05	5015-06
Martin, Berchtold, Aesculap GK55, GK60 Câble à broche double		5015-07	5015-08
Raccord plat (broche fixe) ValleyLab, Lamidey, EMC Câble à broche double		5015-09	5015-11
Raccord plat (broche fixe) ValleyLab, Lamidey, EMC Câble à double broche, coudé		5015-10	5015-12



## Pointes coudées


Certaines de nos pinces sont disponibles avec des pointes coudées. L'angulation se trouve dans la description correspondante de la taille de la pointe. Vous trouverez les pinces à pointes coudées dans les tableaux dédiés portant le symbole des pointes coudées.



## Meilleures ventes

Découvrez dans notre brochure la pince bipolaire ANTI-ADHÉSIVE DORO® préférée des chirurgiens. Les meilleures ventes sont indiquées par des numéros d'articles en caractères gras.

# Tension de dissection réglable (ADF)

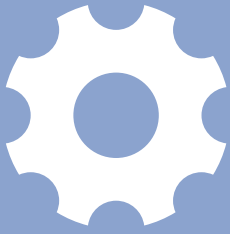

Ajustez rapidement la résistance à la traction et la force de dissection ajustable de votre pince pour un réglage optimal au niveau de la préhension, la dissection, la manipulation et la coagulation. L'innovation de la Force de Dissection Réglable (ADF - Adjustable Dissection Force) vous permet d'ajuster la tension de votre pince DORO® à vos besoins en tournant le volant sur le côté de la pince.

L'utilisation de la ADF de la pince bipolaire ANTI-ADHÉSIVE DORO® peut même réduire le nombre de pinces nécessaires pendant l'intervention chirurgicale.



## Pinces offrant ADF

### Pince-baïonnette, ADF, Pointes droites, Pointe de 5 mm, Coagulation précise

Longueur	Longueur utile	Taille de la pointe 0,7 mm	Taille de la pointe 1,0 mm	Taille de la pointe 1,2 mm
19,0 cm (7.5")	8,5 cm (3.3")	5043.013	5043.014	
22,0 cm (8.7")	11,5 cm (4.5")	<b>5045.013</b>		5045.015

### Pince-baïonnette avec irrigation, ADF, Pointes droites, Pointe de 5 mm, Coagulation précise

Longueur	Longueur utile	Taille de la pointe 0,7 mm	Taille de la pointe 1,2 mm
22,0 cm (8.7")	11,5 cm (4.5")	5045.023	5045.025

### Pince-baïonnette laparoscopique, ADF, Pointes droites, Pointe de 5 mm, Coagulation planifiée

Longueur	Longueur utile	Taille de la pointe 1,2 mm
25,0 cm (9.8")	14,5 cm (5.7")	5058.015

[www.blackforestmedical.com](http://www.blackforestmedical.com).



DORO® Representative



**BLACK  
FOREST  
MEDICAL  
GROUP**

**pro med instruments — partie de Black Forest Medical Group**

Siège social Allemagne | Bötzinger Straße 38 | 79111 Fribourg, Allemagne  
Téléphone +49 761 384 222 10 | E-mail [pmi@pmisurgical.com](mailto:pmi@pmisurgical.com)

Filiale américaine | 4529 S.E. 16th Place, Suite 101 | Cape Coral, FL 33904  
Numéro vert 877 225 4086 | E-mail [pmi.us@pmisurgical.com](mailto:pmi.us@pmisurgical.com)