



BLACK
FOREST
MEDICAL
GROUP

DORO®

NON-STICK BIPOLARPINZETTEN

GERADE



Gerade Spitzen, 5 mm Spitzenlänge, Punktgenaue Koagulation

Länge	Arbeitslänge	Spitzenbreite 0,4 mm	Spitzenbreite 0,7 mm	Spitzenbreite 1,2 mm
12,5 cm (4.9")	4,3 cm (1.7")	5062.012	5062.013	5062.015

BAJONETT



Gerade Spitzen, 5 mm Spitzenlänge, Punktgenaue Koagulation

Länge	Arbeitslänge	Spitzenbreite 0,4 mm	Spitzenbreite 0,7 mm	Spitzenbreite 1,0 mm	Spitzenbreite 1,2 mm	Spitzenbreite 1,5 mm
17,0 cm (6.7")	6,5 cm (2.6")	5022.012	5022.013	5022.014	5022.015	5022.016
20,0 cm (7.9")	9,5 cm (3.7")	5024.012	5024.013	5024.014	5024.015	5024.016
22,0 cm (8.7")	11,5 cm (4.5")	5025.012	5025.013	5025.014	5025.015	5025.016

⌋ Abgewinkelte Spitzen, 5 mm Spitzenlänge, Punktgenaue Koagulation


Länge	Arbeitslänge	Spitzenbreite 1,2 mm 45° nach oben	Spitzenbreite 1,2 mm 45° nach unten
19,0 cm (7.5")	8,5 cm (3.3")	5023.055	5023.065

NON-STICK

Dank der Spitzen aus solidem, edlem Silber bleiben die Antihafteigenschaften der DORO® Pinzette dauerhaft erhalten. Dank der hohen Wärmeleitfähigkeit kommt es nicht zur Überhitzung der Spitzen, wodurch ein Verkohlen und Anhaften von Geweberesten vermieden wird. Die Spitzen brauchen daher nicht ständig gereinigt werden.

PRÄZISE

Die Spitzen aller DORO® Pinzetten sind so konzipiert, dass sie wahlweise eine lokalisierte Koagulation für die Präzisionsmikroskopie ermöglichen oder durch flaches Zusammendrücken der Pinzettenspitzen die Koagulation eines größeren Bereiches. Alle Bajonett-Keyhole-Pinzetten weisen parallel angeordnete Spitzen auf, um die Spreizung der Zinken bei minimal-invasiven Eingriffen zu minimieren.

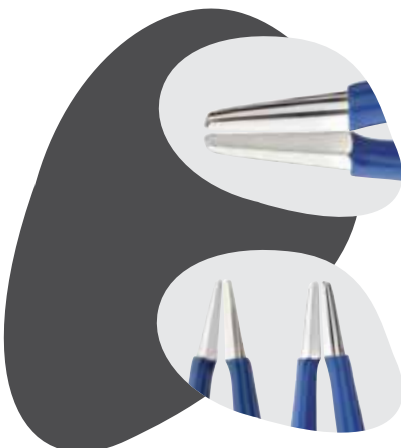

BAJONETT - MIT SPÜLUNG



Gerade Spitzen, 5 mm Spitzenlänge, Punktgenaue Koagulation

Länge	Arbeitslänge	Spitzenbreite 0,4 mm	Spitzenbreite 0,7 mm	Spitzenbreite 1,0 mm	Spitzenbreite 1,2 mm
22,0 cm (8.7")	11,5 cm (4.5")	5025.022	5025.023	5025.024	5025.025

BAJONETT KEYHOLE



Gerade Spitzen, 5 mm Spitzenlänge, Flächige Koagulation

Länge	Arbeitslänge	Spitzenbreite 0,4 mm	Spitzenbreite 0,7 mm	Spitzenbreite 1,2 mm
20,0 cm (7.9")	9,5 cm (3.7")	5034.012	5034.013	5034.015
23,0 cm (9.1")	12,5 cm (4.9")	5036.012	5036.013	5036.015
25,0 cm (9.8")	14,5 cm (5.7")	5038.012	5038.013	5038.015

⌋ Abgewinkelte Spitzen, 5 mm Spitzenlänge, Flächige Koagulation

Länge	Arbeitslänge	Spitzenbreite 0,7 mm 15° nach oben	Spitzenbreite 0,7 mm 45° nach oben
23,0 cm (9.1")	12,5 cm (4.9")	5036.033	5036.053

MAXIMALE SICHT

Das stromlinienförmige Design der DORO® Pinzette bietet ein großes Sichtfeld. Die Spülungspinzette unterstützt Sie bei der Beseitigung von Blutresten aus dem Operationssitus und beim Entfernen von Hämatomen. Sie eignet sich insbesondere für lang andauernde Eingriffe, da sie die entstehende Wärme wirkungsvoll abführt.

SICHER

Unsere langen Pinzetten sind mit einer Führung versehen, die dafür sorgt, dass die Fluchtung der Spitzen erhalten bleibt und eine Überlappung und Scherenwirkung vermieden wird. Dies erhöht die Sicherheit und Präzision.



STERILISATIONSBOX



Autoklavierbar

Für 6 Pinzetten

DORO® Sterilisationsbox
für 6 DORO® NON-STICK Bipolarpinzetten

5011.102

BIPOLARKABEL



Wiederverwendbar

Stecker auf
Generatorseite

Länge 3,0 m
(9.8')

5,0 m
(16.4')

Erbe Stecker
2-Pin Stecker



5015-05

5015-06

Martin, Berchtold,
Aesculap GK55 & GK60
2-Pin Stecker



5015-07

5015-08

Flacher Gerätestecker
ValleyLab, Lamidey, EMC
2-Pin Stecker



5015-09

5015-11

Flacher Gerätestecker
ValleyLab, Lamidey, EMC
2-Pin Stecker, gewinkelt



5015-10

5015-12


ABGEWINKELTE SPITZEN

Einige unserer Pinzetten sind mit abgewinkelten Spitzen lieferbar. Der Winkeltyp ist in der jeweiligen Beschreibung der Spitzengröße angegeben. Pinzetten mit abgewinkelten Spitzen sind in den einzelnen Tafeln mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet.

BESTSELLER

Entdecken Sie die beliebtesten DORO® NON-STICK Bipolarpinzetten in diesem Prospekt. Die meistgekauften Produkte sind an den fettgedruckten Artikelnummern erkennbar.



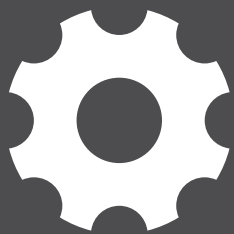

ADJUSTABLE DISSECTING FORCE (ADF)

Optimieren Sie innerhalb von Sekunden die Zugfestigkeit und die Spreiz- und Dissektionskraft Ihrer Pinzette zum Greifen, Sezieren, Bearbeiten und zur Koagulation. Zur individuellen Einstellung genügt es, das Rad der revolutionären ADF-Vorrichtung (Adjustable Dissecting Force - einstellbare Dissektionskraft) seitlich der DORO® Pinzette zu drehen.

Mit der bipolaren DORO® NON-STICK-ADF-Pinzette lässt sich auch die Anzahl der beim chirurgischen Eingriff benötigten Pinzetten verringern.



PINZETTEN MIT ADF

Bajonett, ADF, Gerade Spitzen, 5 mm Spitzenlänge, Punktgenaue Koagulation

Länge	Arbeitslänge	Spitzenbreite 0,7 mm	Spitzenbreite 1,0 mm	Spitzenbreite 1,2 mm
19,0 cm (7.5")	8,5 cm (3.3")	5043.013	5043.014	
22,0 cm (8.7")	11,5 cm (4.5")	5045.013		5045.015


Bajonett mit Spülung, ADF, Gerade Spitzen, 5 mm Spitzenlänge, Punktgenaue Koagulation

Länge	Arbeitslänge	Spitzenbreite 0,7 mm	Spitzenbreite 1,2 mm
22,0 cm (8.7")	11,5 cm (4.5")	5045.023	5045.025

Bajonett Keyhole, ADF, Gerade Spitzen, 5 mm Spitzenlänge, Flächige Koagulation

Länge	Arbeitslänge	Spitzenbreite 1,2 mm
25,0 cm (9.8")	14,5 cm (5.7")	5058.015

www.blackforestmedical.com

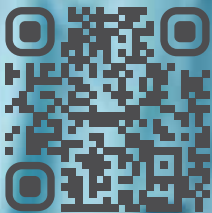

DORO® VERTRETER



**BLACK
FOREST
MEDICAL
GROUP**

pro med instruments – ein Teil der Black Forest Medical Group
Hauptsitz | Bötzingen Straße 38 | 79111 Freiburg, Deutschland
Tel. +49 761 384 222 10 | E-Mail info@blackforestmedical.com

USA | 4529 S.E. 16th Place, Suite 101 | Cape Coral, FL 33904
Toll Free 877 225 4086 | E-Mail info.us@blackforestmedical.com

Version 7, März 2020 ©pro med instruments GmbH - ein Teil der Black Forest Medical Group. DORO® ist ein eingetragenes Warenzeichen (®) von pro med instruments GmbH, Freiburg, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Keine Vervielfältigung ohne schriftliche Einverständniserklärung des Rechteinhabers. Änderungen vorbehalten. Die enthaltenen Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Fehler können jedoch nicht ausgeschlossen werden und begründen keinen Rechtsanspruch. Wir behalten uns das Recht vor, alle Produkte jederzeit zu ändern. Dieser Katalog zeigt Produkte, die möglicherweise nicht in jedem Land für den Verkauf zugelassen sind.