



BLACK
FOREST
MEDICAL
GROUP

DORO[®]

PINCES BIPOLAIRES ANTI-ADHÉSIVES

DROITE



Pointes droites, pointes de 5 mm, coagulation précise

Longueur	Longueur utile	Taille de la pointe 0,4 mm	Taille de la pointe 0,7 mm	Taille de la pointe 1,2 mm
12,5 cm (4,9")	4,3 cm (1,7")	5062.012	5062.013	5062.015

BAÏONNETTE



Pointes droites, pointes de 5 mm, coagulation précise

Longueur	Longueur utile	Taille de la pointe 0,4 mm	Taille de la pointe 0,7 mm	Taille de la pointe 1,0 mm	Taille de la pointe 1,2 mm	Taille de la pointe 1,5 mm
17,0 cm (6,7")	6,5 cm (2,6")	5022.012	5022.013	5022.014	5022.015	5022.016
20,0 cm (7,9")	9,5 cm (3,7")	5024.012	5024.013	5024.014	5024.015	5024.016
22,0 cm (8,7")	11,5 cm (4,5")	5025.012	5025.013	5025.014	5025.015	5025.016

Pointes coudées, pointes de 5 mm, coagulation précise


Longueur	Longueur utile	Taille de la pointe 1,2 mm 45° haut	Taille de la pointe 1,2 mm 45° bas
19,0 cm (7,5")	8,5 cm (3,3")	5023.055	5023.065

ANTI-ADHÉSIVE

Avec des pointes entièrement composées d'argent massif noble, les propriétés anti-adhérentes de la pince **DORO®** sont maintenues pendant toute la durée de vie. Grâce à une conductivité thermique élevée, les pointes ne surchauffent pas, éliminant ainsi le risque de carbonisation et d'adhérence du tissu. Il n'est donc plus nécessaire de nettoyer constamment les pointes.

PRÉCISE

La conception des pointes d'une pince de type Droite, Baïonnette et Baïonnette avec irrigation permet une coagulation précise pour les interventions de microchirurgie ou la coagulation d'une zone plus étendue si les pointes, en appui l'une contre l'autre, forment une surface plane. Toutes les pinces à baïonnette laparoscopiques sont dotées de pointes parallèles pour minimiser l'écartement des dents lors d'approches mini-invasives.

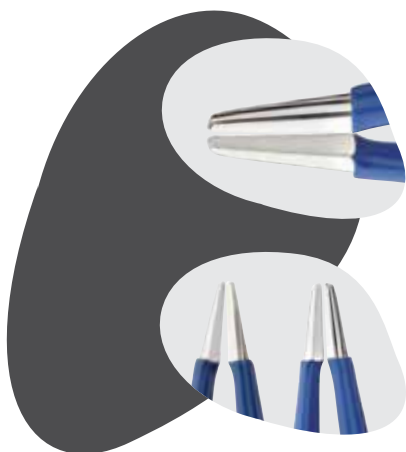

BAÏONNETTE AVEC IRRIGATION



Pointes droites, pointes de 5 mm, coagulation précise

Longueur	Longueur utile	Taille de la pointe 0,4 mm	Taille de la pointe 0,7 mm	Taille de la pointe 1,0 mm	Taille de la pointe 1,2 mm
22,0 cm (8,7")	11,5 cm (4,5")	5025.022	5025.023	5025.024	5025.025

BAÏONNETTE LAPAROSCOPIQUE



Pointes droites, pointes de 5 mm, coagulation planifiée

Longueur	Longueur utile	Taille de la pointe 0,4 mm	Taille de la pointe 0,7 mm	Taille de la pointe 1,2 mm
20,0 cm (7,9")	9,5 cm (3,7")	5034.012	5034.013	5034.015
23,0 cm (9,1")	12,5 cm (4,9")	5036.012	5036.013	5036.015
25,0 cm (9,8")	14,5 cm (5,7")	5038.012	5038.013	5038.015

Pointes coudées, pointes de 5 mm, coagulation planifiée

Longueur	Longueur utile	Taille de la pointe 0,7 mm 15° haut	Taille de la pointe 0,7 mm 45° haut
23,0 cm (9,1")	12,5 cm (4,9")	5036.033	5036.053

VISIBILITÉ MAXIMALE

La conception rationalisée des pinces DORO® offre un champ de vision large. Les pinces avec irrigation permettent d'éliminer le sang résiduel du site chirurgical et d'évacuer les hématomes. Elles conviennent tout particulièrement aux interventions longues car elles dissipent efficacement la chaleur émergente.

SÛRE

Le guide monté sur nos pinces les plus grandes permet de maintenir les pointes alignées et empêche tout risque de chevauchement et de cisaillement. Cela augmente la sécurité et la précision.



PLATEAU DE STÉRILISATION



Autoclavable

Pour 6 pinces

Plateau de stérilisation DORO®
pour les pinces bipolaires ANTI-ADHÉRENTES DORO®

5011.102

CÂBLES BIPOLAIRES



Réutilisable

Fiche,
côté générateur

Longueur

3,0 m
(9,8')

5,0 m
(16,4')

Raccord Erbe
Câble à broche double



5015-05

5015-06

Martin, Berchtold,
Aesculap GK55 & GK60
Câble à broche double



5015-07

5015-08

Raccord plat (broche fixe)
ValleyLab, Lamidey, EMC
Câble à broche double



5015-09

5015-11

Raccord plat (broche fixe)
ValleyLab, Lamidey, EMC
Câble à broche double, coudé



5015-10

5015-12




POINTES COUDÉES

Certaines de nos pinces sont disponibles avec des pointes coudées. L'angle de courbure se trouve dans la description correspondante de la taille de la pointe. Vous trouverez des pinces à pointes coudées dans les tableaux dédiés portant le symbole de pointes coudées.

MEILLEURES VENTES

Découvrez les pinces bipolaires ANTI-ADHÉRENTES DORO® préférées des chirurgiens dans cette brochure. Les meilleures ventes sont indiquées par des numéros d'articles imprimés en gras.

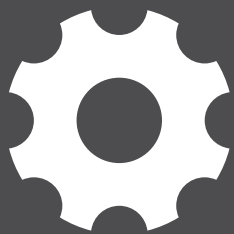

FORCE DE DISSECTION RÉGLABLE (ADF)

Ajustez rapidement la résistance à la traction et la force de dissection réglable de votre pince selon vos besoins pour un niveau optimal de préhension, de dissection, de manipulation et de coagulation. Grâce à la technologie révolutionnaire de force de dissection réglable (Adjustable Dissecting Force, ADF), une molette située sur le côté de votre pince DORO® permet d'ajuster la tension de la pince en fonction de vos préférences.


L'utilisation de la technologie ADF de la pince bipolaire ANTI-ADHÉSIVE DORO® peut même réduire le nombre de pinces nécessaires pendant l'intervention chirurgicale.



PINCES AVEC TECHNOLOGIE ADF

 Pince-baïonnette, ADF, pointes droites, pointes de 5 mm, coagulation précise

Longueur	Longueur utile	Taille de la pointe 0,7 mm	Taille de la pointe 1,0 mm	Taille de la pointe 1,2 mm
19,0 cm (7,5")	8,5 cm (3,3")	5043.013	5043.014	
22,0 cm (8,7")	11,5 cm (4,5")	5045.013		5045.015


 Pince-baïonnette avec irrigation, ADF, pointes droites, pointes de 5 mm, coagulation précise

Longueur	Longueur utile	Taille de la pointe 0,7 mm	Taille de la pointe 1,2 mm
22,0 cm (8,7")	11,5 cm (4,5")	5045.023	5045.025

 Pince-baïonnette laparoscopique, ADF, pointes droites, pointes de 5 mm, coagulation planifiée

Longueur	Longueur utile	Taille de la pointe 1,2 mm
25,0 cm (9,8")	14,5 cm (5,7")	5058.015

www.blackforestmedical.com

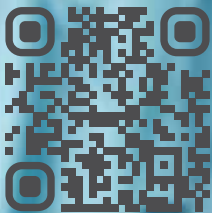

DORO® REPRESENTATIVE



**BLACK
FOREST
MEDICAL
GROUP**

pro med instruments – une entité de Black Forest Medical Group
Siège social | Bötzinger Straße 38 | 79111 Fribourg, Allemagne
Téléphone +49 761 384 222 10 | E-mail info@blackforestmedical.com

Filiale américaine | 4529 S.E. 16th Place, Suite 101 | Cape Coral, FL 33904
Numéro vert 877 225 4086 | E-mail info.us@blackforestmedical.com

Version 7, mars 2020 ©pro med instruments GmbH - une entité de Black Forest Medical Group. DORO® est une marque déposée (®) de pro med instruments GmbH, Fribourg, Allemagne. Tous droits réservés. Le présent document ne peut être reproduit en tout ou parti, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation du détenteur des droits. Sous réserve de modifications techniques sans avis préalable. Les informations ont été rédigées avec le plus grand soin. Certaines erreurs pourraient toutefois être présentes. Les erreurs ne donnent droit à aucune responsabilité juridique. Nous nous réservons le droit de modifier les produits à tout moment. Veuillez prendre note du fait que le présent catalogue décrit également les produits dont la vente n'a pas été autorisée dans tous les pays.